



SPORT

Freestyle™ Swim

Einfach auf den Knopf drücken!

- Mit dem Freestyle Swim kann der Anwender sicher und problemlos zur Schwimm- bzw. Badestelle und wieder zurück gelangen.
- Für das Schwimmen mit Schwimmflossen muss nur der Knopf gedrückt werden, um eine hohe Schwimgeschwindigkeit bei reduziertem Kraftaufwand zu erreichen. Das Knöchelgelenk kann in 0° Stellung oder mit 70° Plantarflexion fixiert werden.
- Der Prothesenfuß unterstützt die Ausbalancierung des Körpers, wodurch ein effizientes Schwimmen ermöglicht wird.
- Maximales Anwendergewicht 116 kg.
- 12 Monate Garantie auf den Knöchelmechanismus, 36 Monate Garantie auf die Karbonfederkonstruktion.



Freestyle Swim (LP2-W2)




Patentierter
Verbundwerkstoff
aus Kohlenfasern
und Glasfasern

Freestyle™ Swim



SPORT

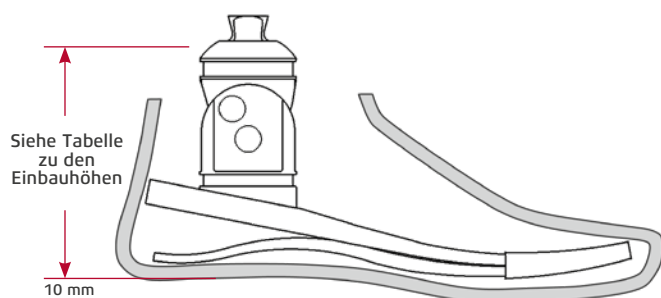

Hinweis: Die angegebene Einbauhöhe bezieht sich auf einen vollständig montierten Prothesenfuß.

Produkt-ID: LP2-W2

Größen: 22-31 cm

Anwendergewicht bis max: 116 kg

Absatzhöhe: 10 mm

Anschluss: Pyramide

Garantie: Fußmodul 36 Monate, Knöchelkonstruktion 12 Monate, Fußkosmetik 6 Monate

Freestyle Swim kann mit einer speziell geformten Fußkosmetik geliefert werden, bitte kontaktieren Sie hierzu den Kundenservice.

Zubehör

- Schutzabdeckung für den Knöchel (KIT-00-200)
- Werkzeug für den Austausch der Prothesenfußkosmetik (ACC-00-103)
- Spectra-Socke Schwarz, standardmäßig im Lieferumfang enthalten (SO-NPS-200xx-00) 25 cm, 30 cm, 35 cm
- Spectra-Socke Weiß, separat zu bestellen (SO-NPS-100xx-00) 25 cm, 30 cm, 35 cm
- Fersenkeile:
 - 22-25cm (KIT-00-11100-00)
 - 26-28cm (KIT-00-11300-00)
 - 29-31cm (KIT-00-11500-00)

Hinweis: Schwarze Spectra-Socke und Fersenkeile sind im Lieferumfang enthalten.

Einbauhöhe & Gewicht

Größen (cm)	Einbauhöhe (mm)	Gewicht (g)
22-25	87	690
26-28	103	860
29-31	111	980

Gewichtsangaben inkl. Fußkosmetik. Die angegebenen Maße sind Durchschnittswerte und können aufgrund der gewählten Kategorie oder fertigungsbedingt variieren.

Auswahl der Karbonfederkategorien

Belastungsgrad			Gewicht (kg)
Niedrig	Mittel	Hoch	
1	1	2	44-52
1	2	3	53-59
2	3	4	60-68
3	4	5	69-77
4	5	6	78-88
5	6		89-100
6			101-116

Prothesenfuß (inkl. Fußkosmetik ohne Anschlusskappe) Bestell-Nummer

LP2-W2-1 A - M - 3

Kategorie 1-6 Größe 22-31 Seite L-links R-rechts Farbton L-light M-medium D-dark