



1

2

3

4



EVERYDAY

Sierra®

Maximale Flexibilität für ein optimales Abrollverhalten

- Die Formgebung des Sierra ermöglicht die Verwendung sehr langer Karbonfasern und sorgt so für eine hohe Energieaufnahme und -rückgabe.
- Die zweigeteilte Karbonfederkonstruktion bietet eine exzellente Pro- und Supinationsbeweglichkeit.
- Der Sierra wird vor allem für Unterschenkelprothesen verwendet.
- Die bis in den Vorfußbereich durchgehende Fersenfeder ermöglicht einen frühen vollständigen Bodenkontakt beim Fersenauftritt und bildet somit die Basis für eine hohe Standsicherheit und ein außergewöhnlich gutes Abrollverhalten.
- Maximales Anwendergewicht 166 kg.
- 36 Monate Garantie.




Geteilte
Vorfußfeder



Option mit
abgespreizter
Groß-Zehe
(Sandalen-Zehe)

Sierra (FS1)

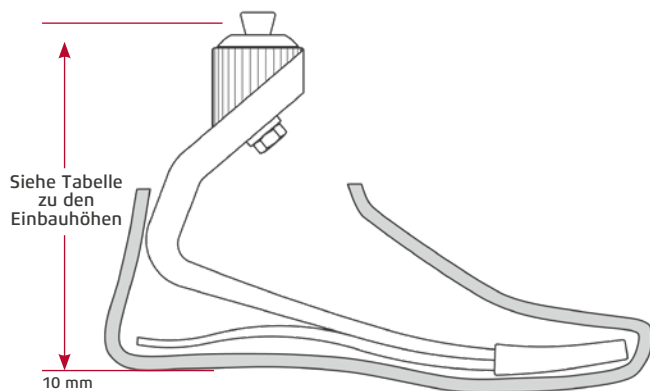

Hinweis: Die angegebene Einbauhöhe bezieht sich auf einen vollständig montierten Prothesenfuß.

Produkt-ID: FS1

Größen: 22-31 cm

Version mit abgespreizter Groß-Zehe (Sandalen-Zehe) in den Größen 22-28 cm verfügbar.*

Anwendergewicht bis max: 166 kg

Absatzhöhe: 10 mm

Anschluss: Pyramide

Garantie: Fußmodul 36 Monate, Fußkosmetik 6 Monate

* Bei Bestellung einer Sandalen-Zehe-Version kontaktieren Sie bitte den Kundenservice für die Lieferzeit.

Einbauhöhe & Gewicht

Größen (cm)	Einbauhöhe (mm)	Gewicht (g)
22-25	146	515
26-28	172	640
29-31	187	750

Gewichtangaben inkl. Fußkosmetik. Die angegebenen Maße sind Durchschnittswerte und können aufgrund der gewählten Kategorie oder fertigungsbedingt variieren.

Auswahl der Karbonfederkategorien

Belastungsgrad			Gewicht (kg)
Niedrig	Normal	Hoch	
1	1	2	44-52
1	2	3	53-59
2	3	4	60-68
3	4	5	69-77
4	5	6	78-88
5	6	7	89-100
6	7	8	101-116
7	8	9	117-130
8	9		131-147
9			148-166

Zubehör

- Werkzeug für den Austausch der Prothesenfußkosmetik (ACC-00-10300-00)
- Spectra-Socke Schwarz, standardmäßig im Lieferumfang enthalten (S0-NPS-200xx-00) 30 cm, 35 cm, 40 cm
- Spectra-Socke Weiß, separat zu bestellen (S0-NPS-100xx-00) 30 cm, 35 cm, 40 cm
- Fersenkeile:
 - 22-25 cm (KIT-00-11353)
 - 26-28 cm (KIT-00-11354)
 - 29-31 cm (KIT-00-11355)

Hinweis: Schwarze Spectra-Socke und Fersenkeile sind im Lieferumfang enthalten.

Prothesenfuß (inkl. Fußkosmetik) Bestell-Nummer

FS1-00- A - -

Zehe	Kategorie	Größe	Ausführung	Seite	Generation	Farbton
0-regular 1-Sandale	1-9	22-31	M-mittleres Profil S-Sandalen- Zehe	L-links R-rechts	3-regular 2-Sandalen- Zehe	L-light M-medium D-dark