



1

2

3

4



TOUS LES JOURS

Freedom Agilix™

Absorption maximale des chocs

- Absorption verticale des chocs et flexibilité de la fibre de carbone optimisés pour des ambulateurs mobilité niveau 3 de faible impact jusqu'à impact modéré ; réduit les efforts tranchants des cavités articulaires et améliore le confort général
- La fonction multiaxiale augmente la conformité avec le sol et la stabilité ; la conception rationalisée donne lieu à une meilleure durabilité de long terme, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent
- Un talon dynamique sur toute la longueur est attaché au niveau des orteils et garantit un roulement sans le moindre problème pour un confort supérieur et une démarche plus symétrique
- Profil moins élevé et poids plus léger que l'alternative concurrente, ce qui permet aux utilisateurs de faire plus et de se sentir moins fatigués à la fin de la journée
- Jusqu'à 166 kg
- Garantie de 36 mois



Freedom Agilix (F15)



Amortisseur de chocs verticaux



Lame Fendue




Orteils Séparés

Freedom Agilix™



TOUS LES JOURS

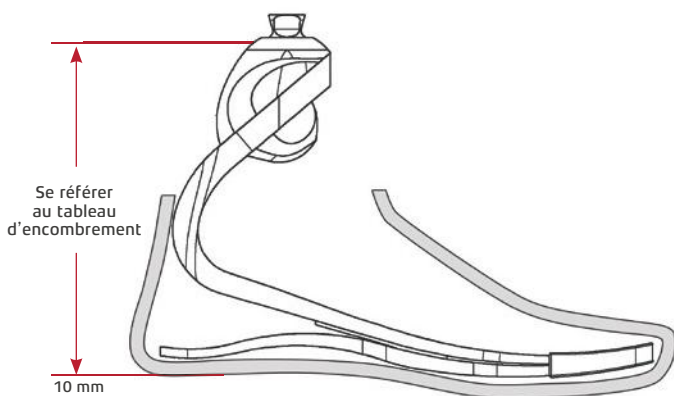

Note : Les mesures de hauteur représentent un pied complet.

Référence : F15

Tailles : 22-31 cm

Option orteils séparés pour les tailles 22-28 cm*

Poids patient maximum : 166 kg

Hauteur de talon : 10 mm

Connexion : Pyramide mâle

Garantie : Module de pied 36 mois, enveloppe de pied 6 mois

*Si vous voulez commander l'orteils séparé, contactez notre service clientèle pour un délai de livraison.

Hauteurs & Poids

Taille (cm)	Hauteur (mm)	Poids (g)
22-25	143	553
26-28	161	609
29-31	172	772

Le poids comprend l'enveloppe de pied. Les mesures sont approximatives et varient en fonction de la sélection de la catégorie.

Sélection de la catégorie

Niveau d'impact		Poids (kg)
Modéré	Normal	
1	1	44-52
1	2	53-59
2	3	60-68
3	4	69-77
4	5	78-88
5	6	89-100
6	7	101-116
7	8	117-130
8	9	131-147
9		148-166

Accessoires

- Chausse pied spécial : (ACC-00-103)
- Chaussette Spectra : (ACC-00-101xx)
30 cm, 35 cm, 40 cm
- Coins talonniers:
 - 22-25 cm (KIT-00-11363)
 - 26-28 cm (KIT-00-11364)
 - 29-31 cm (KIT-00-11365)

Note : Chaussette spectra et coins talonniers sont inclus dans l'emballage

Pied prothétique (incl. enveloppe de pied) Référence

F15-00- **A** - -

Orteils 0-standard 1-séparés	Catégorie 1-9	Taille 22-31	Forme M-standard S-orteils séparés	Côté L-gauche R-droit	Géné- ration 3-orteils std 2-orteils sép	Teinte L-chair M-moyen D-foncé
------------------------------------	------------------	-----------------	---	-----------------------------	---	---