

TOUS LES JOURS

Promenade®

Spécialement conçu pour la marche et le confort


- Déroulé sans effort pour patients moyennement actifs
- La lame fendue partiellement, permet un léger mouvement d'inversion/everion, procurant à l'utilisateur une confiance améliorée pour la marche dans des conditions variées
- La semelle couvrant la longueur du pied dans son intégralité facilite une transition depuis l'attaque du talon jusqu'à l'avant pied, créant une démarche plus fluide ainsi qu'un confort accru tout au long de la journée
- La pyramide mâle et les 5 catégories simplifient le processus d'appareillage, sauvegardant temps et coût
- Jusqu'à 147 kg ce qui lui permet d'appareiller une plus grande gamme d'utilisateurs que les alternatives concurrentes
- Garantie de 36 mois



Promenade (VS2)



Lame Fendue

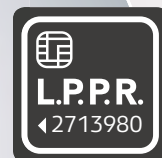


Classe 2

Promenade®



TOUS LES JOURS

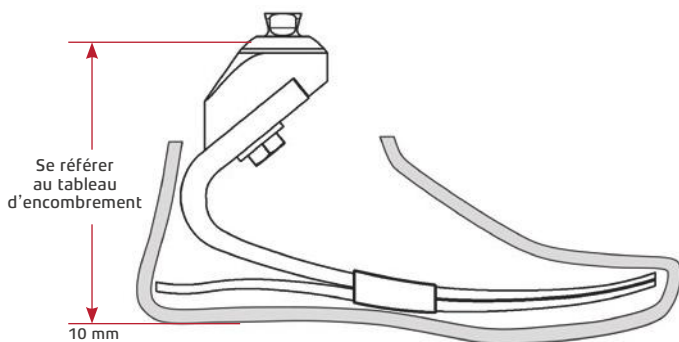

Note : Les mesures de hauteur représentent un pied complet.

Référence : VS2

Tailles : 19-31 cm

Poids patient maximum : 147 kg

Hauteur de talon : 10 mm

Connexion : Pyramide mâle

Garantie : Module de pied 36 mois, enveloppe de pied 6 mois

Accessoires

- Chausse pied spécial : (ACC-00-103)
- Chaussette Spectra : (ACC-00-101xx)
30 cm, 35 cm, 40 cm
- Coins talonniers :
 - 22-25 cm (KIT-00-11393)
 - 26-28 cm (KIT-00-11394)
 - 29-31 cm (KIT-00-11395)

Note : Chaussette spectra et coins talonniers sont inclus dans l'emballage

Hauteurs & Poids

Taille (cm)	Hauteur (mm)	Poids (g)
19-25	116	490
26-28	124	595
29-31	135	710

Le poids comprend l'enveloppe de pied. Les mesures sont approximatives et varient en fonction de la sélection de la catégorie.

Sélection de la catégorie

Niveau d'impact	Poids (kg)
Normal	
1	45-57
2	58-72
3	73-92
4	93-117
5	118-147

Pied prothétique (incl. enveloppe de pied)
Référence

VS2-00-0 A - M - 3

Catégorie 1-5 Taille 19-31 Côté L-gauche R-droit Teinte L-chair M-moyen D-foncé