

TOUS LES JOURS

Renegade® A·T & Renegade® LP-A·T

Performances tout terrain (AT) amplifiées

- Le pied Renegade est le plus dynamique, polyvalent et durable
- La technologie EnduraCore® dure 3 fois plus longtemps que les autres composites
- Le design lame-fendue apporte +/- 15 degrés d'inversion/éversion, pour une stabilité accrue
- La technologie Z-Shock™ absorbe les chocs et les contraintes de cisaillement, offrant à l'utilisateur un plus grand confort
- Construction légère – seulement 515 grammes
- Jusqu'à 166 kg, garantie de 36 mois



Renegade A·T (R11)

Renegade LP-A·T (R16)



Amortisseur
de chocs
verticaux



Lame Fendue




Composites
de fibres de
carbone et de
fibres de verre

Renegade® A-T & Renegade® LP-A-T



TOUS LES JOURS

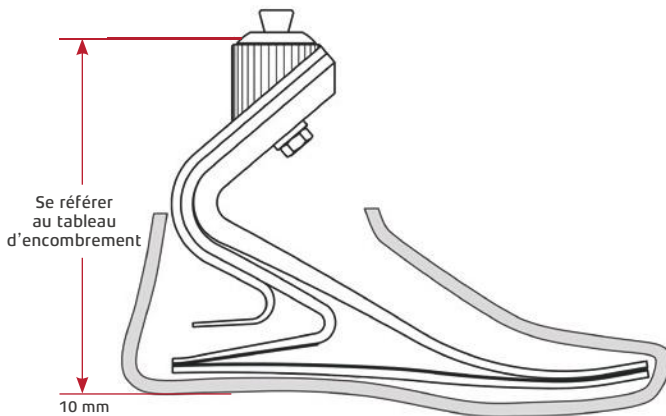

Note : Les mesures de hauteur représentent un pied complet.

Référence : Renegade A-T (R11); Renegade LP-A-T (R16)

Tailles : 22-31 cm

Poids patient maximum : 166 kg

Hauteur de talon : 10 mm

Connexion : Pyramide mâle

Garantie : Module de pied 36 mois, enveloppe de pied 6 mois

Accessoires

- Mollet pré-coupé : (RS1 seulement ; design en deux parties)
 - 22-25 cm (AFP-00-RS101)
 - 26-28 cm (AFP-00-RS102)
 - 29-31 cm (AFP-00-RS103)
- Semelle : (taille et catégorie spécifiques)
 - Orteils standard : (RS1-SP)
- Chausse pied spécial : (ACC-00-103)
- Chaussette Spectra : (ACC-00-101xx)
 - 30 cm, 35 cm, 40 cm
- Coins talonniers :
 - 22-25 cm (KIT-00-116)
 - 26-28 cm (KIT-00-117)
 - 29-31 cm (KIT-00-118)

Note : Chaussette spectra et coins talonniers sont inclus dans l'emballage

Hauteurs & Poids

	Taille (cm)	Hauteur (mm)	Poids (g)
Renegade A-T	22-25	162	625
	26-28	184	765
	29-31	200	945
Renegade LP-A-T	22-25	127	625
	26-28	140	760
	29-31	149	930

Le poids comprend l'enveloppe de pied. Les mesures sont approximatives et varient en fonction de la sélection de la catégorie.

Sélection de la catégorie

Niveau d'impact			Poids (kg)
Modéré	Normal	Elevé	
1	1	2	44-52
1	2	3	53-59
2	3	4	60-68
3	4	5	69-77
4	5	6	78-88
5	6	7	89-100
6	7	8	101-116
7	8	9	117-130
8	9		131-147
9			148-166

Pied prothétique (incl. enveloppe de pied) Référence

<input type="text"/>	-00-0	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>	-M	<input type="text"/>	-3	<input type="text"/>
Pied R11 R16	Catégorie 1-9	Taille 22-31			Côté L-gauche R-droits			Teinte L-chair M-moyen D-foncé