




Silhouette® & Silhouette® LP

Quand la science rencontre le style pour un appareillage simple

- Sa conception en fibre de carbone résistante et ultra légère, une gamme étendue de mouvements permette à l'utilisateur une démarche confortable, en dépensant moins d'énergie
- Sa fine conception facilite la réalisation d'une esthétique tout en finesse
- Le système de double talon créé une réponse dynamique pour la marche normale et un effet propulseur supplémentaire lors d'activités plus intenses
- Classe 3
- En option, la version Low Profile intégrant une pyramide mâle simplifie le montage
- Un adaptateur tubulaire spécial (VERSA) est disponible pour les cas où la lame aurait été coupée trop courte ou pour fournir l'espace nécessaire pour le passage d'un plongeur d'accrochage distal
- Jusqu'à 166 kg, garantie de 36 mois

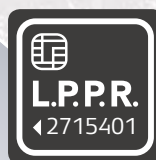

Classe 3


Silhouette LP (RS5/RS9)

Silhouette (RS4/RS8)

Silhouette® & Silhouette® LP



PIEDS SPÉCIALISÉS

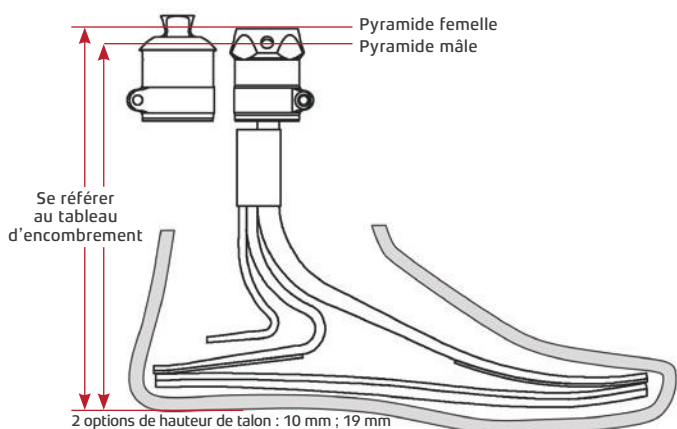

Note : Les mesures de hauteur représentent un pied complet.

Référence : Silhouette (RS4/RS8) ; Silhouette LP (RS5/RS9)

Tailles : 22-31 cm

Poids patient maximum : 166 kg

Hauteur de talon : 10 mm ou 19 mm

Connexion : Pyramide mâle ou femelle, ou serre-tube Versa

Garantie : Module de pied 36 mois, enveloppe de pied 6 mois

Accessoires

- Pyramide femelle, 34 mm : (ACC-00-129)
- Pyramide mâle, 34 mm : (ACC-00-196)
- Insert pour serre-tube : (ACC-00-124) (coupé sur mesure, numéro de série du pied requis)
- Kit d'adaptation Versa : (KIT-00-123V) comprend serre-tube long à pyramide femelle et une bague d'espacement
 - Serre-tube long 34 mm à pyramide femelle : (ACC-EX-123)
 - Bague d'espacement : (KIT-00-123S)
- Adaptateur à pyramide mâle pour genou au standard 30 mm : (ACC-00-195)
- Lame semelle de remplacement à 3 densités : (RS4-SP-0xAxx-xx)
- Chausse pied spécial : (ACC-00-103)
- Chaussette Spectra : (ACC-00-101xx) 30 cm, 35 cm, 40 cm
- Coins talonniers :
 - 22-25 cm (KIT-00-12101)
 - 26-28 cm (KIT-00-12102)
 - 29-31 cm (KIT-00-12103)

Note : Chaussette spectra et coins talonniers sont inclus dans l'emballage

Hauteurs & Poids

	Taille (cm)	Hauteur (mm)	Poids (g)
Silhouette avec pyramide femelle	22-25	178	525
	26-28	191	645
	29-31	201	785
Silhouette LP avec pyramide mâle	22-25	168	430
	26-28	181	550
	29-31	191	685

Le poids comprend l'enveloppe de pied. Les mesures sont approximatives et varient en fonction de la sélection de la catégorie.

Sélection de la catégorie

Belastungsgrad			Poids (kg)
Modéré	Normal	Elevé	
1	1	2	44-52
1	2	3	53-59
2	3	4	60-68
3	4	5	69-77
4	5	6	78-88
5	6	7	89-100
6	7	8	101-116
7	8	9	117-130
8	9		131-147
9			148-166

Pied prothétique (incl. enveloppe de pied) Référence

RS4 (10 mm)	1-femelle	1-9	22-31	L-gauche	L-chaîr
RS5 (LP 10 mm)	2-mâle			R-droit	M-moyen
RS8 (19 mm)	3-versa				D-foncé
RS9 (LP 19 mm)					